

家庭用エアーマッサージ器 モミっくすキュッとリブロー

- 品番：MCR4512
- 製品サイズ：W486×D444×H191mm
- 製品重量：約 4.5kg
- 材質：本体 / ABS 生地 / ポリエステル
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：20W
- 定格時間：15分
- 生産国：中国
- JANコード：4969182505382

▼ 製品イメージ ▼



医療機器認証番号：224AKBZX00100000

一ヶ月の電気代

※1
約 **2.2円**
(1日あたり15分)

※1：電力料金単価 22円/kwhから計算しております。家庭での月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例：血栓（血塞）症、重度の動脈硬化（瘤）、急性静脈炎、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

① ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人 ② 悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ③ 心臓に障害のある人 ④ 温度感覚喪失のある方 ⑤ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ⑥ 糖尿病などによる高度な末梢神経障害からくる知覚障害のある人 ⑦ 皮膚に創傷のある人 ⑧ 安静を必要とする人 ⑨ 体温38℃以上（有熱期）の人（例1：急性炎症症状【けん（瘧）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期 / 例2：衰弱しているとき）⑩ 骨粗しょう（鬆）症の人、せきついで（骨）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【とう（疼）痛性】疾患の人 ⑪ 脚にケガをしている人 ⑫ かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人 ⑬ その他、医療機関で治療中の人 ⑭ 上記以外に身体に異常を感じている人

●脚以外の部位へのマッサージには使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。●本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。●カバーが外れたり、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の原因になります。●本機の連続使用耐久時間は最高15分です。15分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後一時間は使用にならないでください。●専用アダプター以外は使用しないでください。火災や感電故障の原因になります。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ（雑音）が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●湯気・湿気の多い場所や室温が10℃以下35℃以上の状態では使用にならないで下さい。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。●必ず椅子や床などに腰掛けた状態でご使用ください。機器の上にとったり、無理に体重をかけるご使用はお止めください。

お問い合わせ、ご相談は当店へ

アルインコ製品のお買い物・取扱い方法・その他ご不明な点は

アルインコフィットネス サービスセンター

フリーダイヤル

0120-30-4515

受付時間 AM10:00～PM4:00（平日PM12:00～1:00、土日祝除く）

アルインコホームページ

<http://www.alinco.co.jp/>

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル1F
TEL：(06)7636-2350 FAX：(06)6208-3886

※本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属されていません。 ※掲載の製品の色調は印刷の為、実物と多少異なる場合がございます。 ※掲載の製品のデザイン・仕様は一部変更している場合があります。 ※このカタログの内容は2012年9月現在のものです。

「足」 + 「ふくらはぎ」 2箇所が同時にマッサージできる 本格マッサージャー。

新機能



ふくらはぎ
エアーマッサージ



足
エアーマッサージ



(((キュッとリブロー)))
Repro
MCR4512
ふくらはぎ
足先 かかと
足裏 足の甲

効果・効能

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉のコリ・疲れをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の緩和

「足」+「ふくらはぎ」が同時にマッサージできる優れもの!

ダブルエアーマッサージが疲れた足とふくらはぎをしっかりと癒す。

今までのエアーマッサージは足全体を包み込むタイプとふくらはぎにアタッチメントを巻くタイプに分かれていました。「キュッとリプロ」はその2つのマッサージをドッキング、一度に足とふくらはぎ2つのマッサージが楽しめます。

新機能

ふくらはぎエアーマッサージ

アタッチメントを取り付けてむくみが気になるふくらはぎをキュッと締め付けます。

ふくらはぎ専用アタッチメント

足エアーマッサージ

本体が足先からかかと、足首までしっかりと包み込み、エアで足を揉みほぐします。

マッサージ部位

足先	かかと
足裏	足の甲



ここがポイント!

ふくらはぎ部のアタッチメントの締め付け具合でマッサージの強弱を調節することが出来ます。

アタッチメントの着脱も簡単!



①ホースを差込口に差し込みます。



②ふくらはぎにアタッチメントを装着します。



③面ファスナーでしっかりと固定します。

簡単に操作できる操作パネル。



停止ボタン

【停止ボタン】を押すとマッサージを停止させることができます。

強さボタン

エア強度を弱 / 中 / 強の3段階から調節することが可能です。

スタート/プログラムボタン

ボタンを押すとマッサージが開始されボタンを押すごとにコースが変更できます。

誰でも使いやすい、かんたん操作。

①ACアダプターをコンセントに差し込みます。

②本体のメインスイッチをONにします。




本体スイッチ

OFF ◀ ○ ▶ ON

③マッサージメニューを選びます。

【スタート / プログラムボタン】を押してコースを選択すれば、マッサージが開始されます。

ボタンを押すたびにプログラムを変更する事ができます。

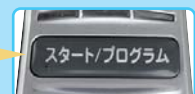

④停止ボタンを押してマッサージを停止。

⑤本体のメインスイッチをOFFにして終了。

スタート / プログラム でコースを切替。

【スタート / プログラムボタン】を押すたびにプログラムコースが変わります。オススメのコースを選んで下さい。

【P1】しっかりコース

しっかりした開放と圧迫を繰り返し足とふくらはぎをもみあげます。

【P2】ゆったりコース

ゆったりとした動きで段階的に締め付け足とふくらはぎをほぐします。

【P3】やすらぎコース

足とふくらはぎをやさしく低圧(75%)で保持してほぐします。



点灯

プログラムランプ

選択されているプログラムはプログラムランプを目安にしてください。

使用例

使用例 & 持ち運び方法

手順①

イスに座り、本体の中に足を入れてください。



手順②

体を楽にしてイスに腰掛け、足を90度にして図のように使用してください。



持ち運び方法

本体側面には持ち運びに便利な持ち手が付いています。移動や持ち運びの際は必ず持ち手を持ってください。

持ち手がとっても便利。

