

## 多彩なメニューをワンタッチで簡単操作

コースの選択や、マッサージ位置の調節などを簡単に設定する事が出来ます。

**① エアー強さ表示**

使用されているエア어의強さを点灯表示します。

弱 / 中 / 強

**② 【プログラム】ボタン**

内蔵されたプログラムを選択する事が可能です。ボタンを押すたびに強度が切り替わります。

オートコース    ダブルエアークース

**③ 【マニュアル】ボタン**

お好みのマッサージメニューを選択することが可能です。【肩エアー】と【腰エアー】はボタンを押すたびにエアアー強度が切り替わります。

肩エアアー    腰エアアー    腰もみ

**④ 【ヒーター】ボタン**

モミ玉に内蔵されたヒーターを動作させます。

※ヒーターの温度は人肌程度です。

**⑤ 【振動】ボタン**

ボタンを押すとシート部の振動が開始。振動が優しくマッサージしてくれます。

**⑥ 【肩位置調節】ボタン**

自分の体格に合わせて肩位置の高さを調節する事が出来るのでベストポジションでお使い頂けます。

無段階調節可能

## 折りたたんで収納上手

使わない時は折りたたんでおけば収納も簡単。お部屋の隅に置いてスッキリ収納。また、軽量コンパクトだから女性でも持ち運びが容易に行えます。

**収納手順**

ベルトで止める。

持ち運びラクラク

軽量！コンパクト！移動も簡単！

たったこれだけ！

スッキリ収納！

### 製品仕様

製品名: どこでもマッサージャー モミックスキング NEO  
 番: MCR2200 (C)  
 製品サイズ: W445 × D540 × H770mm(背もたれ角度70°時)  
 製品重量: 約8.0kg  
 電源: AC100V(50/60Hz)  
 消費電力: 25W(電動機23W/電熱部2W)  
 定格時間: 15分  
 生産国: 中国  
 J A N コード: 4969182505443  
 医療機器認証番号: 224AKBZX00071000



一ヶ月の電気代  
 約2.2円\*1  
 (1日あたり15分)

\*1: 電気量料金単価 22円/kwh から計算しております。家庭での月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

### 警告

※本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。  
 ※本製品の使用制限体重は90kgです。  
 ※1回のご使用時間は、15分以内にしてください。  
 ※医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。  
 ※医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は必ず医師にご相談の上、その指示に従ってください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
- 心臓に障害のある人。
- 温度感覚喪失のある人。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人。
- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温38度以上(有熱期)の人。例1 急性炎症症状【けん(瘧) 怠惑、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2 衰弱している時。
- 骨粗しょう(鬆)症の人。
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(背椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人。
- 脚にケガをしている人。
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人。
- 背椎(せきつい)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人。
- その他、医療機関で治療中の人。上記以外に身体に異常を感じている人。

### 注意

※本製品をテレビの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。  
 ※室温が10度以下35度以上の状態ではご使用にならないでください。  
 その他、本製品付属の取扱説明書に従い、正しくお使いください。

### アルインコ製品のお買い物・取扱方法・その他ご不明な点は

■アルインコサービスセンター  
 フリーダイヤル  
**0120-30-4515**  
 A.M10:00~P.M4:00 (P.M12:00~1:00及び土・日・祝を除く)  
 ■アルインコのホームページ  
<http://www.alinco.co.jp/>

### アルインコ株式会社

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル14F ☎(03)3278-5170  
 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル12F ☎(06)7636-2350  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前1-3-6 第3博多借成ビル7F ☎(03)3278-5170

●お買い求め、ご相談は当店へ

本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属されていません。  
 掲載の製品の色調は印刷の為、実物と多少異なる場合があります。  
 掲載の製品のデザイン・仕様は、一部変更している場合があります。

FNLIEFM- Ver.1.0

「どこでもマッサージャー」は  
 使う「場所」と「時間」を  
 選びません！



### 多彩なマッサージ機能

肩エアアー  
 マッサージ

リアルなもみほぐし

腰もみ  
 マッサージ

モミ玉が腰をほぐします

腰エアアー  
 マッサージ

側面から腰を締め付け

振動  
 マッサージ

心地よい振動が気持ちいい

【効果・効能】  
 あんま・マッサージの代用  
 疲労回復 / 筋肉のコリ・疲れをほぐす  
 血行促進 / 神経痛・筋肉痛の緩和




# 3種類の 本格マッサージ機能でカラダを 「もみほぐす」

## Massage Menu 1

### 肩 エアーマッサージ

リアルなもみほぐし

肩エアーマッサージは上からと後ろからつかむようにマッサージしてくれます。本当の手でもまれているようなリアルな感覚で疲れた肩をもみほぐしてくれます。

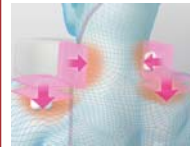

#### 上側から

上から肩をピンポイントで指圧。リアルなもみが疲れた肩も優しく癒します。



#### 後方から

後方から背中上部をマッサージ。エアートポイントが優しくもんでくれます。

## Massage Menu 2

### 腰 もみ玉マッサージ

モミ玉が回転しながら上下。腰の筋肉をもみほぐします。ヒーター内蔵で腰もほかほか。



## Massage Menu 3

### 腰 エアーマッサージ

側面から腰を締め付け

エアータグが心地よく骨盤を包み込んで、左右からギュッと締め付けます。



## Massage Menu 4

### 振動 マッサージ

心地よい振動が気持ちいい

シート部分がブルブルと振動する、振動マッサージ機能を内蔵しています。



新しくなった  
「もみもみ」  
がさらに  
気持ちいい!



# イスやソファにセットするだけの新タイプ! エアー+モミ玉で肩や腰を優しく癒す「どこでもマッサージャー」

リビングやオフィスなどで普段使っているイスに本体を取り付けたり、壁に立て掛けるだけでマッサージャーに変身。日頃の疲れで凝り固まった肩や腰も「エアーマッサージ」と「モミ玉マッサージ」で優しく癒します。いつでもどこでもあなたの癒しの空間に。



#### 簡単に操作出来る コントローラー付き

コースの選択や強度の調節などが簡単に設定できる便利なコントローラー付き。



#### イスの固定に便利な 固定用ベルト付き

本体をしっかり固定できるから、様々なイスで使う時も安心してお使い頂けます。



#### 使わない時も安心な コントローラーポケット

コントローラー収納用のポケットが付いているから未使用時も邪魔にならない。



#### お手入れしやすい 本革風ソフトレザー※

本革のようにやわらかい質感のソフトレザーを使用。お手入れがとても簡単です。  
※レザー調の合成皮革を使用。



#### クッション性のある シートで座り心地も快適

シートはクッション性の高い材質を使用しているので座っている時も快適です。



カンタン!  
ワンタッチ  
設定!

その日の体調や気分に合わせて選べる

## 2種類のマッサージコース


2種類のプログラムを内蔵しているから目的に合わせて使い分けが可能です。



### オートコース

肩+腰のエアーマッサージと腰もみのマッサージ3種が作動します。エアーともみが疲れた体を優しく癒します。

肩エアー 腰エアー 腰もみ

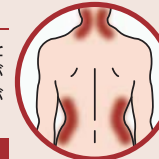

### ダブルエアークース

肩と腰の2種類のエアーが作動します。肩と腰を優しく包み込み、エアーの力で心地よくマッサージします。

肩エアー 腰エアー