

フットインマッサージャー デュアルラボ

- 品番：MCR4714
- 製品サイズ：W450×D380×H256mm
- 製品重量：約 8.4 kg
- 材質：本体 / ABS 生地 / ナイロン
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：60W
- 定格時間：15 分
- 生産国：中国
- JANコード：4969182506747

▼ 製品イメージ ▼



医療機器認証番号：225AKBZX00143000

一ヶ月の電気代

※1
約 **9.9円**
(1日あたり15分)

※1：電力量料金単価 22 円 /kwh から計算しております。家庭での月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用・足マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例：血栓（血塞）症、重度の動脈けいゆう（痙）、急性静脈けいゆう（瘧）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ① ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内種込み型医用電気機器を使用している人
- ② 悪性しゅよう（腫瘍）のある人
- ③ 心臓に障害のある人
- ④ 温度感覚喪失のある人
- ⑤ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ⑥ 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある人
- ⑦ 皮膚に創傷のある人
- ⑧ 安静を必要とする人
- ⑨ 体温 38℃以上（有熱期）の人（例1：急性炎症症状【けん】怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期 / 例2：衰弱しているとき）
- ⑩ 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【どう（疼）痛性】疾患の人
- ⑪ 脚にケガをしている人
- ⑫ かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人
- ⑬ その他、医療機関で治療中の人
- ⑭ 上記以外に身体に異常を感じている人

●足以外の部位へのマッサージには使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。●本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。●布カバーが外れたり、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の原因になります。●本機の連続使用耐久時間は最高15分です。15分以上の連続動作はお止めください。また、ご使用後一時間は使用にならないでください。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声（雑音）が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●湯気・湿気が多い場所や室温が10℃以下35℃以上の状態では使用にならないで下さい。正常に動作しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。●必ず椅子に腰掛けた状態でご使用ください。機器の上にとったり、無理に体重をかけるご使用はお止めください。

お買い求め、ご相談は当店へ

アルインコ製品のお買い物・取扱い方法・その他ご不明な点は

アルインコフィットネス サービスセンター
フリーダイヤル
0120-30-4515
受付時間 AM10:00～PM4:00（平日PM12:00～1:00、土日祝除く）

アルインコホームページ
<http://www.alinco.co.jp/>

アルインコ株式会社 フィットネス事業部
〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル
TEL.(06)7636-2350 FAX.(06)6208-3886

※本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属されていません。※掲載の製品の色調は印刷の為、実物と多少異なる場合があります。※掲載の製品のデザイン・仕様は一部変更している場合があります。 ※このカタログの内容は2014年1月現在のものです。

ALINCO

フットインマッサージャー デュアルラボ MCR4714 カタログ (2014年1月)

ぐいぐい揉みほぐす!

ローラー マッサージ
ぎゅ〜っ〜と気持ちいい!
エアー マッサージ

ダブル Wの揉みで筋肉のこりを すっきり解消!!!

ぐいぐい揉まれて
きもちいいっつぱ!



上から・下から・横から
効果的に揉みほぐす!

デュアルラボの特長

ローラーとエアーのW揉み!

3段階の強弱調節!

布カバーが洗えて清潔♪



布カバーは取り外して洗濯できます!



フットインマッサージャー
DUAL*LABO

- 足先
- かかと
- 足裏

効果・効能

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉のこり・疲れをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の緩和




計算されたエアとローラーのマッサージで、 疲れた足をしっかり包みこみ、ほぐす。



1. 「エア」×「ローラー」のスペシャルな揉み心地！

・エアマッサージ

両サイドのエアバッグが足全体を優しく包み込みます。圧迫と解放、そしてスライド動作で疲れた足をしっかりと揉みほぐします。

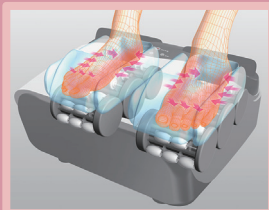

・ローラーマッサージ

足先・足裏・かかとの3箇所に、コリをしっかりほぐすためのローラーがあります。大小のローラーが足裏全体を揉みほぐします。



2. デュアルラボの特長

1 ながらリラックス

テレビを見ながら・パソコンを見ながらリラックス♪



2 揉みレベル調節


3段階の強度調節で、その日の疲れに合わせた揉みが可能！



3

自分ではできない揉みほぐし

足裏をぐいぐい押して、疲労回復に…！

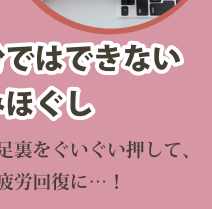

4

面倒な設定要らず

使い方は、足を入れるだけ。疲れをすばやくほぐします！



3. カンタン操作のコントロールパネル！

本体に内蔵されたコントロールパネルでモードや強度の調節がワンタッチ。

簡単操作で
すぐに
始められる

操作ボタン

- ① 強度 エアの強度を調節できます。
- ② エア エアマッサージが作動します。
- ③ ローラー ローラーマッサージが作動します。
- ④ モード 3種類のモードが選択できます。
- ⑤ 全停止 ボタンを押すと緊急停止します。
- ⑥ 電源 マッサージのON/OFFを行います。

使用状態を
ランプでお知らせ！

安心の
自動タイマー
15分OFF



4. 多彩なオートプログラムモードでご満足頂けます！



3段階の強度

その日の疲れや気分に合わせて強弱をお選び頂けます。弱コースは、刺激に弱い方用の設定にしております。



エアモード

ボタンを押すとローラーが止まり、エアでの加圧のみになります。



ローラーモード

ボタンを押すとエアが止まり、ローラーでの刺激のみになります。



3種類のプログラム

- I ローラーとエアバッグで全体的にマッサージします。
- II ローラーとエアバッグ（足先を左右に振ります）で足裏と土踏まずを重点的にマッサージします。
- III ローラーとエアバッグでかかとを重点的にマッサージします。

内蔵された3種類のモードから、お好みのモードを選べます。

ご使用方法

①イスに座り、本体の中に足を入れてください。



②体を楽にしてイスに腰掛け、足を90度にして左図のように使用してください。

持ち運び方法

本体底をしっかりと持ち、床から持ち上げて移動させてください。



女性でも
移動カンタン！

布カバーが洗えます！

布カバーは取り外し洗濯可能。お手入れ簡単で、いつでも清潔にお使い頂けます！

