

首から足まで。全身のこり、すっきり  
“なごみ” タイム

疲れたら、“なごみ”



ALINCO  
MCR8700T

深く、こりに効く。

首  
マッサージャー  
も  
み  
た  
い  
む

な  
ご  
み



動画でチェック!



もみパッド+もみ玉  
あつたかヒーター  
3種類のもみモード

🍃 手もみ感覚  
🍃 人肌のあたたかさ  
🍃 お好みマッサージ

製品仕様

- 販売名：首マッサージャー もみたいむ なごみ ○品番：MCR8700
- 製品サイズ：W350 × D570 × H190(mm) ○定格時間：15分
- 本体質量(重量)：約1.6kg(ACアダプター含)
- 定格電圧：100V(50/60)Hz ○医療機器認証番号：228AKBZX00002000
- 定格消費電力：18W(電動機9W/電熱部9W)
- 主な材質：本体…ポリウレタン、操作部…ABS(アクリロニリルブタジエンス共重合合成樹脂) ○付属品：ACアダプター ○JAN：4969182510737

⚠️ 安全に関する注意

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例：血圧(高血圧)症、重度の動脈硬化(動脈硬化)、急性静脈血栓症(血栓)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。○悪性(がん)腫瘍のある人。○心臓に障害のある人。○温度感覚喪失のある人。○妊娠初期の不安定期または出産直後の人。○糖尿病などによる高度な失明(失明) 循環障害からくる知覚障害のある人。○皮膚に創傷のある人。○安静を必要とする人。○体温38℃以上(有熱期)の人。例1)急性炎症症状【けん(腫) 怒怒、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2)衰弱しているとき。○骨粗しょう症(骨) 症の人、せきつ(骨) 骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど。急性【とび】 疾患の人。○けがをしている人。○かつて治療を受けたところ、また患部へ使用する人。○脊椎に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人。○その他、医療機関で治療中の人。○上記以外に身体に異常を感じている人。

●うつ伏せ、仰向けの姿勢で頭部や顔面に使用しないでください。けがや事故の原因となります。●本体のすき間には絶対に手・足などを入れてください。けがや事故のおそれがあります。●カバーが破れた状態では使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。●本機の連続使用最大時間は最高15分です。マッサージは15分以上しないでください。また同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え逆効果となるおそれがあります。●15分以上の連続動作はおやめください。また、ご使用後1時間は使用にならないでください。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●湯気、湿気の多い場所や室温が10℃以下35℃以上の状態では使用にならないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、製品の劣化も早めます。●機器の上にとったり、無理に体重をかけるご使用はお止めください。

効果・効能

疲労回復・血行をよくする  
神経痛、筋肉痛の緩和  
筋肉のこり、疲れをほぐす

首

肩

腰

太もも

ふくらはぎ

アルインコ製品のお買い物・  
取扱い方法・その他ご不明な点は

アルインコフィットネス カスタマーサービス課

0120-30-4515

受付時間 AM10:00~PM4:00  
(平日PM12:00~1:00、土日物販)

上記以外のお問い合わせ FAX:072-678-6410  
E-mail:fitness@alincoco.jp

アルインコ株式会社

フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江 1-1-1

アルインコ ホームページ <http://www.alincoco.jp/>

お買い求め、ご相談は当店へ



※本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属していません。  
※掲載の製品の色調は印刷のため、実物と多少異なる場合があります。  
※掲載の商品のデザイン・仕様は一部変更している場合があります。  
※このカタログの内容は2016年4月現在のものです。

FNLIEJNH- ver.1.0



筋肉のこりをグッと掴んで  
揉みほぐし。首、肩、すっきり。

# “なごみ” 特長

## 新機能

### 首を左右から挟む「はさみもみ」

#### もみパッド

もみ心地を意識して設計した大きなもみパッド。広い範囲で左右から挟みこみぎゅぎゅっと首筋を揉みほぐします。

#### もみ玉

下部のもみ玉は、指で押すようにピンポイントでしっかりこりに入り込み、ぐいぐい肩を揉みほぐします。



#### 洗濯できて清潔

肌に直接触れる布カバーは、取り外して洗濯ができます。いつでも清潔にお使いいただけます。



#### お得な電気代


月々の電気代は約4円※とっても経済的♪  
※1日15分使用の場合。 ※電気料金単価 27円/kwhで算出



#### 15分オートオフ機能

マッサージ開始から15分で自動で電源が切れます。揉みすぎ・切り忘れを防止でき安心、安全です。

## 3種類のマッサージモード

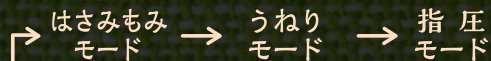

もみボタンを押すとモードが変わります。



#### あったかヒーター

2つのもみパッドが人肌程度に温まり、マッサージをアシストします。



#### 揉み強さ調節

ハンドルを引っぱって強度調節。お好みの強さでマッサージができます。

## 簡単操作

- もみボタン** マッサージのモード切替ができます。
- はやさボタン** マッサージの速さ調節ができます。
- ヒーターボタン** ヒーターの「入/切」ができます。
- 電源ボタン** マッサージの開始と終了ができます。