


ALINCO

クッショニマッサージャートレド

MCR8100M/P

取扱説明書

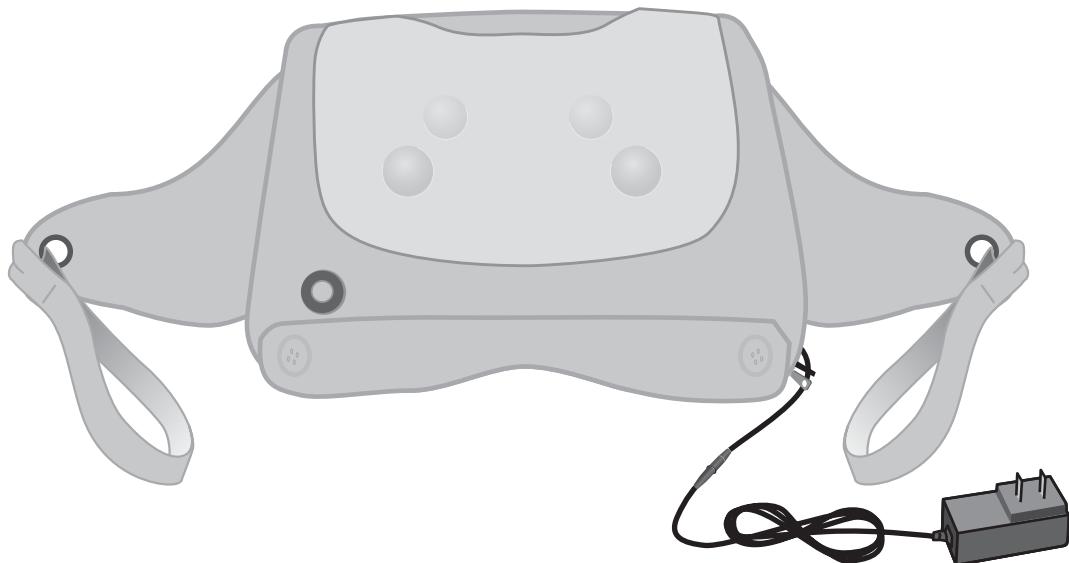

安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、クッショニマッサージャートレドMCR8100M/Pをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

尚、本製品の連続使用時間は15分です。(連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

●無断の複製は固く禁じます。

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称
付属品

ご使用前に

使用例

お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。

表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検してください。

！ 警 告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

！ 注 意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。



分解をしないでください。



確認をしてください。

安全のため必ず
守つていただきこと

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますので了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

！ 警 告



- 本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 保護者の方は子供だけでの使用や、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物等をお近づけにならないようご注意ください。
- カバーが、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本製品は体重90kg以下の人人が使用することを想定して作られています。体重が90kgを超える方や、装身具を身につけて90kgを超える方は使用しないでください。ご使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 機器の上に立ったり、座ったり無理に体重をかけるご使用方法はおやめください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。気が悪くなるなど体調不良を起こす恐れがあります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こす恐れがあります。

！ 注意

- 1回のご使用時間は15分以内にしてください。15分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。

- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例 血栓【血塞】症、重度の静脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 悪性しゆよう(腫瘍)のある人。
- 心臓に障害のある人。
- 温度感覚喪失のある人。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人。
- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温38°C以上(有熱期)の人。
例1 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血压変動など】の強い時期。
例2 衰弱しているとき。
- 骨粗しうよう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人。
- 脚にケガをしている人。
- かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。
- 脊椎に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人。
- その他、医療機関で治療中の人の。
- 上記以外に身体に異常を感じている人

- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。

- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。

- 本製品を直接肌にあてて使用しないでください。必ず衣類などを着用しご使用ください。

警告・注意

⚠ 注意



- 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- 本機を置いてご使用する際は、本体が十分安定しているかご確認ください。
- 日本国内で使用してください。
- ご使用前には、正常に作動するか確認してください。本製品に故障や破損など異状が発見された場合には、使用しないでください。



- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- ACアダプターは規定されたもの又は指定されたものを使用してください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

⚠ 警告



- 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。

⚠ 注意



- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。



- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

電動機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —

⚠ 警告

- ご使用後は必ず電源スイッチがOFFになっているか確認していただき、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならない時や、雷が鳴り出したときには、ACアダプターをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 停電の時には直ちにACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ACアダプターは最後まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるんでは感電・ショート・発火の原因になります。

- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 室温が10°C以下・35°C以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。

- コンセントからACアダプターを抜き差しする時には、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないでください。また、電源コードやプラグが傷んだり、差し込みがゆるんだ状態のままのご使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用しないで当社サービスセンターにご連絡ください。

- 本製品に故障や破損など異状が発見された場合には、直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まずは当社サービスセンターまでご相談ください。
- 電源コードが破損した場合には、当社サービスセンターまでご連絡ください。当社以外での修理は行わないでください。
- 機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。


- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 使用しても効果が現れないときは、医師または専門家にご相談ください。
- お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の指導に従って処分してください。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

安全のため必ず守つていただきこと

各部の名称 付属品

梱包をあけましたら、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■本体

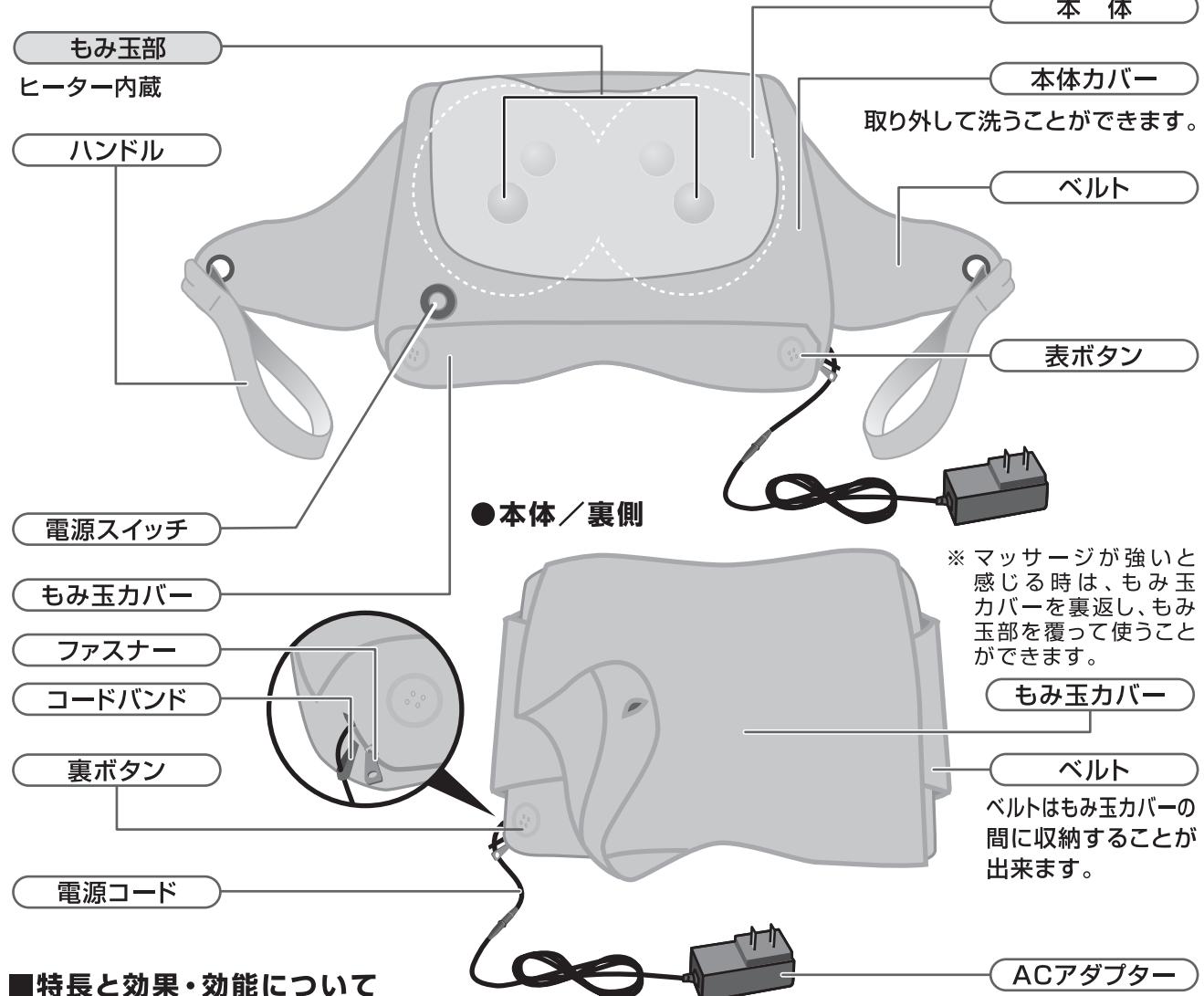

各部の名称
付属品

■特長と効果・効能について

■ 使用目的・効能または効果 ■

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

特 長


- クッション部の大小のもみ玉がリズムよくローリングし、マッサージします。
- もみ玉にはヒーター機能（人肌程度）を内蔵しています。
- クッション部にハンドル付の便利なベルトが付いています。
手の届きにくい場所まで簡単にマッサージできます。
- 約15分で自動停止するオートオフタイマーを内蔵しています。

ご使用前に

■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。


1 ACアダプターのプラグをつなぎます

まっすぐ根元までしっかりと差し込んでください。

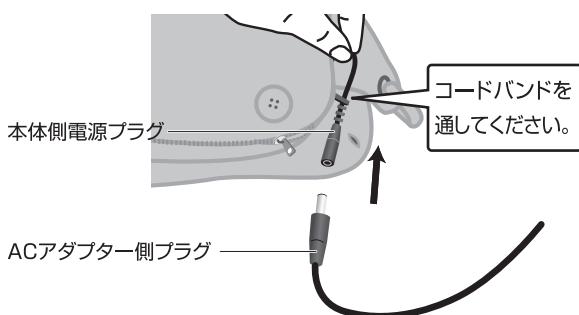

2 ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます

ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

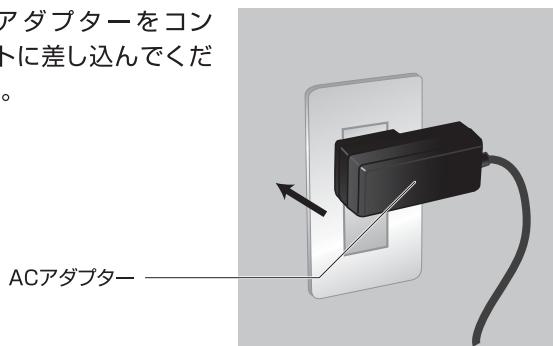

3 電源スイッチを押し、マッサージを始めます

スイッチを押すと電源が入ります。※この時点で15分タイマーが作動します。

【1回押しの場合】

もみ玉が作動し、マッサージを開始します。

【3回押しの場合】


マッサージを停止します。

【2回押しの場合】

マッサージとヒーターが作動します。

※もみ玉が赤く点灯します。

★人肌程度に温まります。

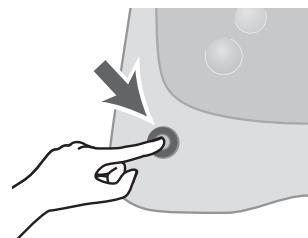

スイッチを押すとマッサージを途中で停止することができます。

終了後は、本体の電源がOFFになっていることを確認してからACアダプターをコンセントから抜いてください。

■マッサージが強いと感じた場合

もみ玉カバーを裏返して使えば、マッサージの刺激が弱まります。


①本体表面の表ボタン(2つ)を外し、
もみ玉カバーを折り返します。



②折り返したもみ玉カバーで前面を
覆います。



③本体を裏返し、本体裏面の裏ボタンを
閉めれば、取付完了です。

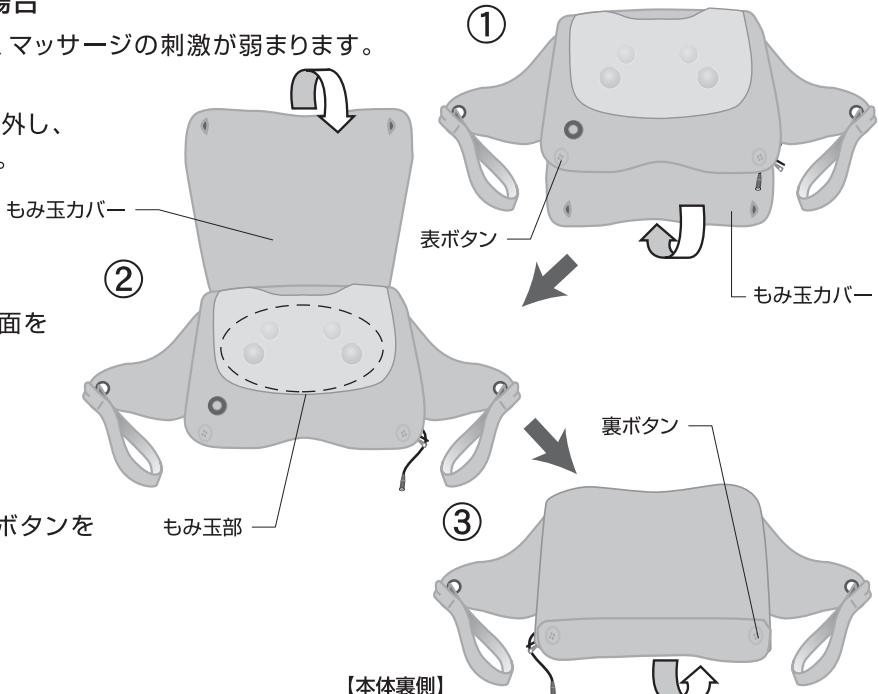

オートオフ機能について

電源スイッチを押してから15分経過すると、自動的に動作を停止します。

▲注意


- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは15分以上しないでください。また、同じ部位へ5分以上マッサージしないでください。
身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となる恐れがあります。
- モーターロック、温度上昇によって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、機械を休ませてから再度電源をONにしてください。

使用例

■腰や背中をマッサージする

- 1 電源スイッチを押しマッサージを開始します。
- 2 両手でベルト部のハンドルをしっかりと握り、マッサージを腰（背中）に回します。
- 3 もみ玉が腰（背中）の部位に当たるようにマッサージを動かします。


もみおろし

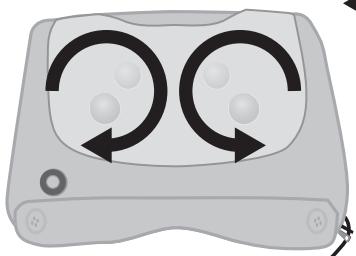

180°回転させる



もみ上げ

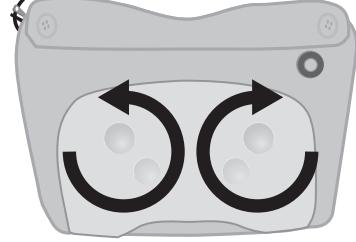


- モミが強く感じる場合はタオルなどを敷いてご利用ください。
- 柔らかいベッドやソファーの上の使用やベルトのハンドルを持ってマッサージする場合モミが弱まることがあります。

■その他の部位の使い方


背中や腰、
肩に



ふくらはぎや
ふとももに

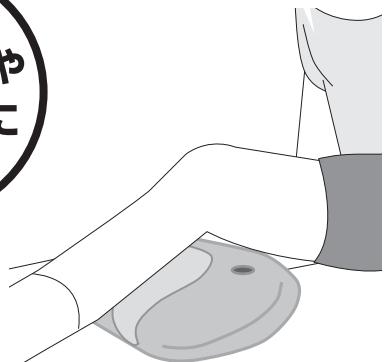

腕
手のひら

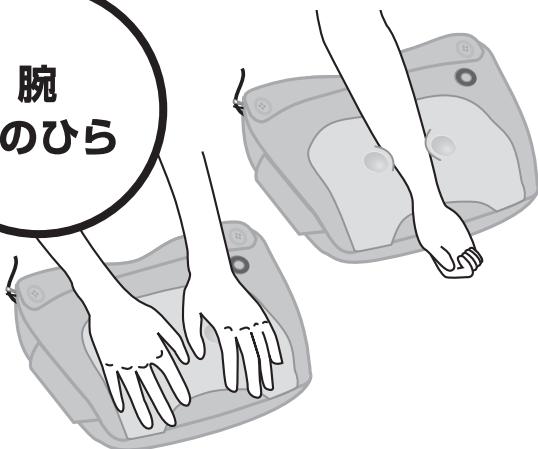

★痛みを我慢して続けるマッサージは
お止めください。

- 人により必要なマッサージの時間・強度は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりか筋肉痛や皮膚を痛めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、
すぐに使用を中止してください。



△ 注意

- アクセサリーなど硬いものをつけた状態で使用しないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意してください。また、首の前方はマッサージしないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- もみ玉部を下にして、作動させないでください。故障の原因となります。

お手入れ方法など


■お手入れ方法 (本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。)

- お手入れの前には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。この時、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。シミや変形の原因になります。



本体力バーの外し方/洗濯方法について


- ①もみ玉カバーをとめているボタンを外し、コネクターをコードバンドから外してください。

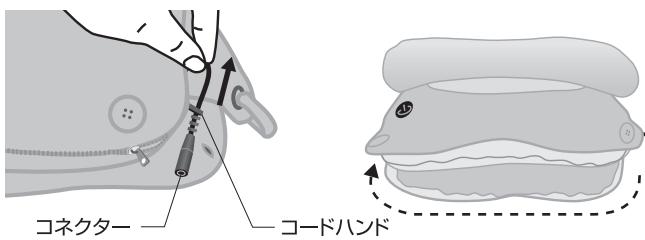


- ②本体力バーのファスナーを開けてください。

- ③電源スイッチカバーを本体フックから外し、本体内部を取り出します。

注意:取り外した電源スイッチカバーは紛失しないよう注意してください。

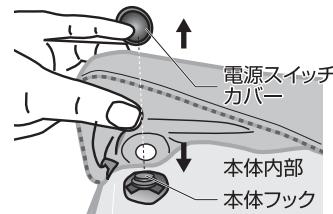


- ④本体力バーの洗濯絵表示に従い洗濯し、しわをのばしてから、日陰に干してください。

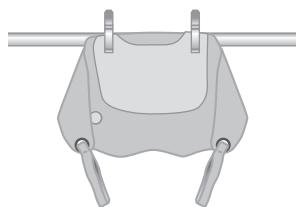


本体力バーの取付方法

- ①本体力バーを被せ、電源スイッチカバーを本体フック位置に合わせてカバーと本体をしっかりと固定します。

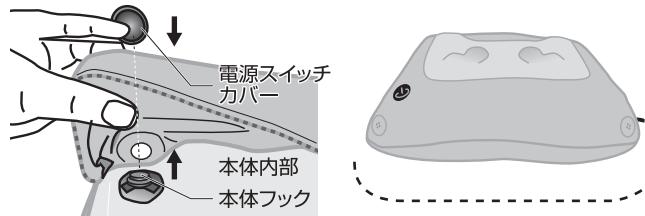

- ②本体力バーのファスナーを閉じてください。

- ③コードバンドにコネクターを通して固定します。

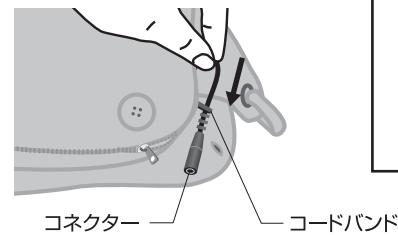

注 意

洗濯時は必ず電源スイッチカバーを外してください。



■保管および廃棄について

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の取り決めに従ってください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。

故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チェック箇所
●動かない	→ ○ 電源スイッチカバーが本体フックから外れていませんか? (本頁「本体力バーの取付方法」参照) ○ ACアダプター側プラグと本体側電源プラグが正しく接続されていますか? ○ ACアダプターがコンセントから抜けていませんか? ○ 長時間の使用で本体が熱くなっていますか? (1時間程度時間をおいて本体内部の温度を下げてから使用してください。)
●停止する	→ ○ 無理な力をかけていませんか?(過負荷防止装置が働いていますので、一旦ACアダプターをコンセントから抜き、もう一度差しなおしてください。) ○ 開始後15分経過していませんか?自動タイマーが作動しています。

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず下記のサービスセンターに相談ください。

お問い合わせは サービスセンター 0120-30-4515 (AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

お手入れ方法など
故障かな?と思う前に