

ほっとひといき
ぽかぽか、とんとん、ぎゅっぎゅ



頑張った
足に

お疲れの
腰に

凝った首・
肩周りに

よく使った
手に

お休み前に

テレビを
見ながら

人肌くらいに温まるもみ玉でぽかぽか

ぬくもりを感じながらマッサージ。
温めることでよりマッサージ効果も
アシストします。

ON/OFF 切替

ヒーターはON/OFFの
切替ができるので、
お好みに合わせて
お使いいただけます。

※画像はイメージです

■ お買い求めに関するご相談は ■

■ 安全に関するご注意 ■

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血圧[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示にしたがってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末梢(指)循環障害からくる知覚障害のある方。・皮膚に創傷のある方。・安静を必要とする方。・体温38℃以上(発熱期)の方。例1)急性炎症症状【けん(痲)急感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2)衰弱しているとき。・骨粗しょう(鬆)症の方。せま(脊)椎の骨折、ねん(捻)挫、肉離れなど、急性【とう(痛)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せま(脊)椎に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●身体の不自自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●日本国内でご使用ください。

■ 製品に関するお問い合わせ ■

☎ 0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)
アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation



@alincO_fitness



@alincO_fitness

Web カタログはこちら



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。
●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。


管理医療機器

FNLIELEF- ver. 1.0

カラダをまる
癒しのリラ/マ



「揉み」と「たたき」のクッションマッサージャー

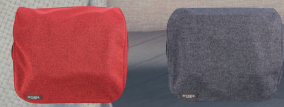

a rela
massage

新機能

たたきマッサージで奥の方のこりもとんとん

たたきマッサージではこりの深いところまで振動が届くようなしっかりとした叩きです。より深いマッサージを味わっていただけます。



ON/OFF 切替

たたきマッサージはON/OFFができるので、使いたいときだけお使いいただけます。

もみ玉が身体にフィットしてぎゅっぎゅつ♡と揉みほぐし

もみ玉が回転してこりを挟み込みながら揉みほぐし。もみ玉にはそれぞれ大小2つの突起がついた形状で、強弱のある刺激を受けながら気持ちよく揉みほぐされます。

回転切替

たたきマッサージOFFでもみ玉の回転が反転、たたきマッサージをONにすると正転に戻ります。



色々な部位にお使いいただけます



＃肩、首マッサージ



＃背中、腰マッサージ



＃ハンドマッサージ



＃ふくらはぎマッサージ



＃足裏マッサージ

強弱調節

布カバーをした状態でお使いいただくと、揉みやたたきの強さが和らぎます。



大きくて押しやすい操作ボタン

本体側面についた3つのボタンで操作します。ボタンが押しやすくなりました。

ボタンアップ



電源ボタン …電源のON、OFFができます。
モードボタン …もみ玉の回転方向、たたきの有無を変更できます。
ヒーターボタン …ヒーターのON、OFFができます。

すぐに使える♪ボタン操作

たたき、ヒーター機能はON/OFFができます。

電源ボタン (P)



もみ玉正転
たたき開始



マッサージ
停止

モードボタン (M)



もみ玉反転
たたき停止



もみ玉正転
たたき再開

ヒーターボタン (H)



ヒーター開始



ヒーター停止

便利な機能・電気料金

気軽に、長くお使いいただけるよう、便利な機能を搭載。いつでもお使いいただけます。

もみ過ぎ・
切り忘れ防止

オートタイマー
10分

安心してお使い
いただけます。

一ヶ月の電気代

月々
約4円※

経済的にご使用
いただけます。

※もみ+たたき使用、1日10分使用の場合
※電気料金単価27円/kwhで計算

効果・効能、製品仕様

効果・効能…◎疲労回復 ◎血行促進 ◎筋肉の
コリ・疲れをほぐす ◎神経痛・筋肉痛の緩和

製品仕様

◎販売名:クッションマッサージャー 8118 ◎品番: MCR8118 (H/R) ◎製品サイズ: W310×D270×H130mm ◎製品質量(重量): 約1.9kg (Aアダプター含む) ◎電源: AC100V 50-60Hz ◎定格消費電力: 24W (電熱部4W) ◎定格時間: 10分 ◎電気代: 約4円/月 ※1日あたり10分使用の場合※電気料金単価27円/kwhで算出 ◎材質: 本体…ウレタン、ABS (アクリロニトリル/ポリエステル) ◎JAN: MCR8118H…4969182514209 / MCR8118R…4969182514506 ◎生産国: 中国 ◎医療機器認証番号: Z30AGBZX00115000