

「歩きっぱなし」や「立ち仕事」などで  
疲れが溜まってしまっている足。  
そんな凝り固まった足を、  
エアーでぎゅっと包み込みながら、  
もみ玉でしっかりもみほぐし。  
その日の足の疲れをしっかりと  
マッサージすることができます。  
毎日、頑張っている足に  
ひと時の安らぎを  
プレゼントしてあげましょう。



#### ■ お買い求めに関するご相談は ■

#### ■ 安全に関するご注意 ■

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓(そく)栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示にしたがってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しょう(相)循環障害からくる知覚障害のある方。・安静を必要とする方。・体温38℃以上(有熱期)の方。例1) 急性炎症症状【けん(傷)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2) 衰弱しているとき。・骨粗しょう(鬆)症の方。・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(腫)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・皮膚に創傷のある方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。●身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上でご使用ください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●日本国内でご使用ください。

#### ■ 製品に関するお問い合わせ ■

☎0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)  
アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江1-1-1

#### 公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation



@alincoco\_fitness



@alincoco\_fitness

web カタログはこちら



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。  
●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

管理医療機器  
FNLIEMNL-ver.1.0

a rela  
massage

がんばった足への  
ご褒美タイム

足を包み込むエアー&突起がついたもみ玉で  
疲れた足をしっかりとマッサージ!



MCR4519 (N)  
フットインマッサージャー 4519


# こだわりのマッサージ機能

人の手でマッサージされているかのような、心地よさが味わえます。



## エア

エアの加圧で足を包み込み、強弱の動きをつけながら、血行を巡らせます。

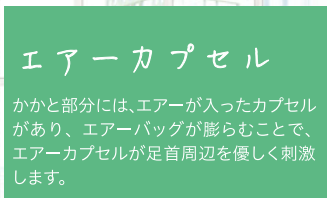

## エアカプセル

かかと部分には、エアが入ったカプセルがあり、エアバッグが膨らむことで、エアカプセルが足首周辺を優しく刺激します。



## もみ玉

足裏部分には、突起が付いたもみ玉がありもみ玉が回転することで、足裏をしっかりとみほくします。


### 効果・効能

○疲労回復 ○血行促進 ○筋肉のコリ・疲れをほぐす ○神経痛・筋肉痛の緩和

## （マッサージの方法）


### エア × もみ玉

エアで足をホールドしながら、もみ玉で足裏をしっかりとみほくします。

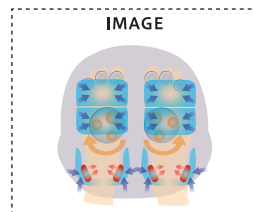


### エア

エアの加圧で足を包み込み、血行を巡らせます。かかとのエアカプセルで、程よい刺激を与えながら、足首周辺をマッサージします。

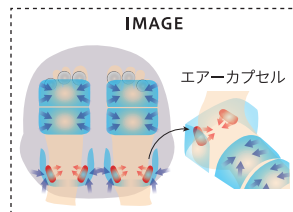

### もみ玉

突起の付いたもみ玉が、回転しながら土踏まず付近をもみほくします。

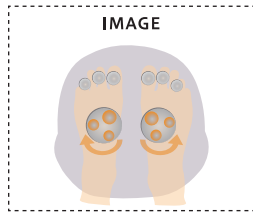

## （マッサージの切替）

電源ボタンを押すとマッサージが始まり、さらに電源ボタンを押すごとにマッサージが切替わります。

- 1 push **エア**+もみ玉マッサージ
- 2 push **エア**マッサージ
- 3 push **もみ玉**マッサージ
- 4 push 電源OFF


## （シンプルで簡単操作）

- ① 全停止ボタン  
マッサージが停止します。
- ② 電源ボタン  
マッサージの切替。
- ③ ヒーターボタン  
ヒーターのON/OFFを切替。
- ④ エア強度ボタン  
エアの強度を切替。



## （清潔に使える）

交換カバーは、取り外して洗濯できるので、いつでも清潔にご使用いただけます。

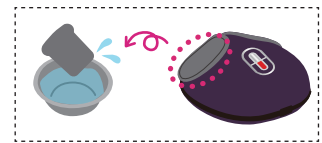


## （ヒーター機能）

もみ玉には、人肌程度に温まるヒーターが内蔵。



## （エア強度は2種類）

その日の疲れに合わせた、エア強度が選べます。

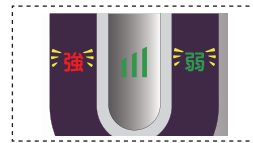

## （便利な機能・電気代）

もみ過ぎ・切り忘れ防止

オートタイマー  
10分

1ヶ月の電気代

月々  
約 3 円

※1日10分使用の場合。※電力量料金単価27円/kwhで算出。

## （製品仕様）

○販売名:フットインマッサージャー 4519○品番:MCR4519(N) ○製品サイズ:W355×D365×H168mm  
○製品質量(重量):約2.3kg(ACアダプター含む)○電源:AC100V(50-60Hz)○定格消費電力:22.5W(電熱部7W)○定格時間:10分○電気代:約3円/月 ※1日あたり10分使用の場合 ※電力量料金単価27円/kwhで算出○材質:本体…ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、POM(ポリアセタール)/交換カバー…ポリエステル○生産国:中国○JAN:4969182515060  
○医療機器認証番号:301AGBZX00041000

