

重みのあるヘッド



たたきパターン



ヘッドに重量感を持たせることで、  
パワーのある力強い「たたき」マッサージを  
実現。深いコリにもアプローチします。

『プログラムモード4パターン』 『速度調節4段階』  
『アタッチメント3種類』

その日のコンディションに  
合わせて強さやアタッチメントを組み替えて、  
毎日の疲れを癒します。



1分間で約2100\*回の  
たたき振動

素早いたたきでこりを一気に  
ほぐします。

\* 約2100回～2760回の振動をします。



気軽に持ち運び、  
ながらマッサージが  
できる便利な  
ハンディタイプ。

片手で使える



詳しいご使用方法を  
Web動画でも

お問い合わせに関するご相談は

取り扱い方法・ご不明な点は

アルインコフィットネス カスタマーサービス課

フリーダイヤル  
0120-30-4515

受付時間 AM10:00～PM4:00(平日PM12:00～1:00、土日祝除く)

製品情報、取扱説明書、その他弊社商品は

アルインコフィットネス 検索

弊社情報をはじめ、取扱説明書、使い方動画などを記載しているホームページです。



アルインコ公式 Facebook 新商品情報や、美容・健康に関する情報をお届けしています。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず付属の「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

◎本製品は一般家庭用マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部に当たる部位には使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。

◎次に該当する人は本製品を使用しないでください。

○医師から使用を禁じられている人(血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう、急性静脈りゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。)症状を悪化させるおそれがあります。

◎医師の治療を受けているときや下記の方は必ず医師と相談のうえ、その指示にしたがってください。守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。○悪性腫瘍のある人。○心臓に障害のある人。○温度感覚喪失のある人。○妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。○糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人。○皮膚に創傷のある人。○安静を必要とする人。○体温38℃以上(有熱期)の人。例1 急性炎症症状【倦怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2 衰弱しているとき。○骨粗鬆症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【疼痛性】疾患の人。○けがをしている人。○かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人。○脊椎に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人。○その他、医療機関で治療中の人。○上記以外に身体に異常を感じている人。

◎現在健康でも、下記のような方は必ず医師と相談のうえ使用してください。守らないと健康を損なうおそれがあります。

○加齢により筋肉の衰えた方や痩身の方。○椎間板ヘルニアなど骨や内臓に起因する腰痛の方。○打ち身や捻挫のしやすい方。○乗り物酔いの激しい方。○過去に心臓や内臓の手術をされた方。○背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方。

◎その他、付属の取扱説明書に記載されている内容をお守りください。

■製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。■改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。■日本国内でご使用ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部  
カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

<http://www.alinco.co.jp/>

FNLIKEN- ver.1.0

MCR5018(R)  
ハンドマッサージャー



重量感のあるヘッドで

「強」  
刺激

管理医療機器

欲しい刺激に  
合わせて  
使い分けができる

## もう手放せなくなる「強」振動

満足の行く「強さ」を求めて。より深い揉み心地を追求し、アタッチメントから新設計。力強く、深みのあるマッサージが可能になりました。



### ワイドリラックス

面で刺激します。



### ポイントリラックス

ピンポイントで刺激します。



### ショルダーマッサージ

肩にフィットする形状です。




### コントロール パネル

⊕を押すとたたきの速度が速くなり、  
⊖を押すと速度が遅くなります。  
4段階の速さ調節が可能です。

プログラムモードが始まります。  
4種のコース切替もこのボタンです。



どこでも便利な  
ハンディ  
タイプ

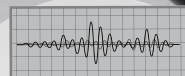

### プログラムモード 4種類

- I 短いリズムでたたきます。
- II 長いリズムでたたきます。
- III 短いリズムでたたきが始まり、速いリズムに変わります。
- IV ランダムでたたきの速度が変わります。

### 効果・効能

血行促進、疲労回復、  
筋肉の疲れを取る、  
筋肉のコリをほぐす、  
神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⌚  
オートタイマー  
15分

たたきの速度  
4段階

### 製品仕様

●販売名…ハンドマッサージャー 5017 ●品番…MCR5018 ●定格消費電力…11W ●定格時間…15分 ●製品サイズ…W88.5×L326×H144 mm ●製品質量(重量)…約1.1kg  
●主な材質…ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) ●付属品…アタッチメント3種 ●生産国…中国 ●月々の電気代…約3円/月 [※1日15分使用の場合  
※電気量料金単価 27円/kwhで算出] 医療機器認証番号… 229AHBZX00036000

## 身体の疲れに癒しを

肩、背中、腰、太もも、ふくらはぎ、足裏…  
こりの箇所をピンポイントでマッサージ。

